
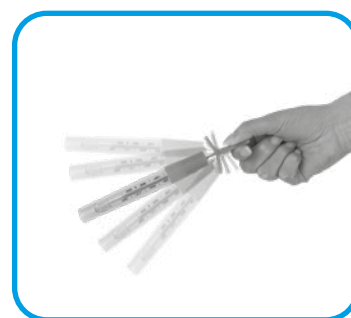


ECO TERMOMETRO ECOLOGICO

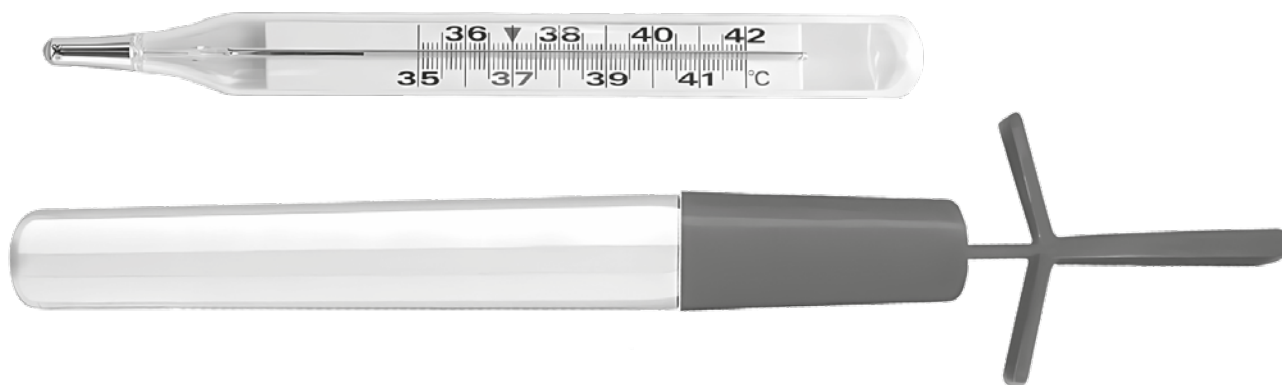

 **MONTEFARMACO**

Modello - Model: MedLife ECO termometro ecologico

M25551-M-Rev.6-02.26



Wuxi Medical Instrument Factory Co., Ltd.
No. 43 Xixin Road, ZhangJing, Xibei Town,
Wuxi city, Jiangsu, 214194, China
Made in China

GIMA 10943
059151260401




Lotus NL B. V.
Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA
The Hague, Netherlands



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



MONTEFARMACO OTC SPA
Via IV Novembre, 92 - 20021 Bollate (MI) Italy
reception@montefarmaco.it
www.montefarmaco.com

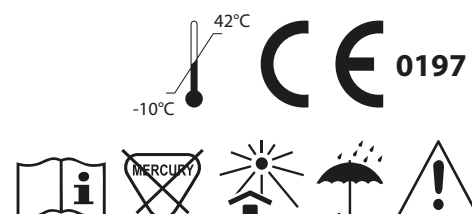

MEDLIFE ECO TERMOMETRO ECOLOGICO

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

- Il termometro clinico senza mercurio è un dispositivo di misurazione della temperatura del paziente ed è indicato per misurazioni sotto la lingua, sotto l'ascella o nel retto.
- Il prodotto è conforme alla norma EN+1:2000-12470A1:2009 riguardante i termometri clinici - Parte 1: Termometri a dilatazione di liquido metallico in vetro con dispositivo di massimo:
 - Condizioni di utilizzo: l'intervallo di temperatura di misurazione deve essere compreso tra °35C e °42C e la temperatura ambientale (solo per il termometro senza mercurio) deve essere compresa tra °20C e °30C; se la temperatura dell'ambiente in cui è conservato il termometro è inferiore a °20C, si prega di lasciare il termometro ad una temperatura compresa tra °20C e °30C per almeno 2-1 ore, o tra °30C a °35C per dieci minuti, prima dell'uso o di seguire qualunque test.
 - Mantenere il termometro ad una temperatura compresa tra °10-C e °42C durante la conservazione e il trasporto.
 - Smaltimento del termometro: dopo l'uso, scuotere il termometro in modo che il liquido metallico scenda verso il basso, quindi pulirlo e riporlo in una custodia di plastica per evitare di danneggiarlo.

Avviso per una corretta esecuzione dei movimenti oscillatori: afferrare saldamente la parte terminale del termometro con il pollice e l'indice e, facendo molta attenzione, scuotere leggermente il termometro più volte fino a quando il liquido scende.

- Modalità di funzionamento
 - Il liquido contenuto nella colonna deve scendere al di sotto del segno più basso della scala graduata prima dell'uso, quindi pulire e disinfettare il termometro clinico con alcool medico, oppure posizionarlo su un tubo di plastica sterilizzato.
 - In caso di misurazione per via orale, fare attenzione a posizionare correttamente il termometro sotto la lingua del paziente e chiedergli di chiudere bene la bocca.
 - In caso di misurazione per via rettale, si raccomanda di applicare un lubrificante sul termometro prima di inserirlo nell'ano.
 - In caso di misurazione sotto l'ascella, fare attenzione a posizionare correttamente il termometro e chiedere al paziente di stringerlo bene, in modo che rimanga fermo in posizione.

Si prega di leggere la misurazione rilevata dal termometro clinico dopo circa 4 minuti dall'esecuzione delle suddette procedure.

- Avvertenze
 - Avvertire i pazienti di non masticare, parlare e giocare quando il termometro clinico è posizionato sotto la lingua;
 - Fare sdraiare i bambini in modo che stiano tranquilli e sia più facile tenere ferma l'estremità del termometro clinico in caso di uso rettale, per evitare che venga inserito troppo in profondità o che scivoli dall'ano.
 - Evitare di fare il bagno, mangiare o fumare fino a mezz'ora prima della misurazione della temperatura corporea;
 - Questo termometro non è pensato per applicazioni speciali (ad esempio, termometri per neonati prematuri, termometri basali);
- Smaltimento del termometro clinico

Il liquido metallico è una lega composta da gallio, indio e stagno, pertanto questotermostro clinico deve essere maneggiato con cura. In particolare, occorre fare attenzione a non fare cadere lo strumento o a trattarlo in qualunque modo che possa provocare danni. In caso di rottura del termometro clinico, pulire il liquido metallico con un panno inumidito con acqua e sapone. Il prodotto può essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici.
- Descrizione dei simboli

	Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso
	Conservare al riparo dalla luce solare
	Conservare in luogo fresco ed asciutto
	Leggere le istruzioni per l'uso
	Fabbricante
	Data di fabbricazione
	Rappresentante autorizzato
	Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745
	Modello
	Numero di lotto
	Limite di temperatura
	Senza mercurio
	Importatore
	Identificatore univoco del dispositivo
	Dispositivo medico
	Data di scadenza
	Distributore

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

MEDLIFE ECO ECO-THERMOMETER

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

- Mercury free clinical thermometer is a kind of measuring device for patient's temperature, and it can be used to measure the temperature of patient's mouth or armpit or anus.
- The product is in compliance with EN+1:2000-12470A1:2009, Clinical thermometers - Part 1: Metallic liquid-in glass thermometers with maximum device:
 - The conditions of use: measuring temperature range should be between °35C to °42C, and the environment temperature (for mercury free thermometer only) should be °20C to °30C; if the temperature for storage is less than °20C, please put the thermometers in the temperature °20C to °30C for at least 2-1 hours or °30C to °35C for ten minutes before use or test.
 - The temperature should keep °10-C to °42C when it is stored and transported;
 - Disposal of the thermometer: after use, swing the metallic liquid down, then cleaning it and put it plastic case to avoid any damage.

Notice for swing: catch the tail part of the thermometer by thumb and forefinger tightly and carefully, swing the thermometer lightly several times until the liquid down.

- Operation procedures
 - The liquid column shall fall below the lowest numbered scale mark before use, then clean and disinfect the clinical thermometer in medical alcohol or put on a sterilized plastic tube.
 - Be careful to put it below the tongue of patients if measuring oral position and tell them to close their mouth tightly.
 - A clinical thermometer for rectal use is applied some lubricator before inserting it in the anus.
 - Be careful to put it below the armpit of patients if measuring armpit position and tell them to tight it tightly.

Please read the number of the clinical thermometer about 4 minutes after above measuring steps.

- Warning
 - Warn patients against chewing, speaking and playing when the clinical thermometers are below the tongue of patients;
 - Need to let sick children lie quietly and help them to hold another end of the clinical thermometers for rectal use in case it is inserted too deep, or it slips from the anus.
 - Avoid having a bath, eating or smoking half an hour before taking body temperature;
 - It is not designed for special applications (e.g. thermometers for premature babies, ovulation thermometers);
- Disposal of the Clinical thermometers

The metallic liquid is an alloy consisting of gallium, indium and tin. this clinical thermometer should be handled with care. In particular, care should be taken to avoid dropping the instrument or treating it in any way that could result in damage. When the clinical thermometers are broken, cleaning split metallic liquid by a damp cloth with soap suds and the product can be disposed together with other household waste.
- Symbol Description

	Caution: read instructions (warnings) carefully
	Keep away from sunlight
	Keep in a cool, dry place
	Consult instructions for use
	Manufacturer
	Date of manufacture
	Authorized representative
	Medical device compliant with Regulation (EU) 2017/745
	Model
	Lot number
	Temperature limit
	Mercury free
	Importer
	Unique device identifier
	Medical Device
	Expiry date
	Distributor

GIMA WARRANTY TERMS

The Gima -12month standard B2B warranty applies.